


# Indicaciones en intervenciones a pacientes SAHS con sospecha o COVID-19 positivo



1. Indicar el cese la utilización del CPAP/BPAP/AutoCPAP hasta resolución COVID-19.
2. Tranquilizar al paciente, no es una terapia de soporte vital y el cese es transitorio.
3. Recomendar dormir en una **habitación separada**, con la **puerta cerrada** en caso de convivir con más personas en el domicilio y **ventilar la estancia cada día** cuando se finaliza el uso de la terapia,
4. Adoptar las **medidas habituales de aislamiento y extremar la higiene** del domicilio, equipamiento y fungible.
  - **Mascarilla:** Limpieza diaria con agua y jabón neutro o solución desinfectante, secar al aire.
  - **Circuito paciente:** Limpieza diaria por la parte exterior e interior introduciendo en un cubo con agua y jabón o solución desinfectante, enjuagar muy bien y dejar secar evitando que quede agua en el interior del circuito.
  - **Filtro de entrada:** diariamente limpiar filtro con agua, escurrir bien, y dejar secar antes de volver a usarlo.
  - **Equipo de cpap:** con agua y detergente suave o con alcohol isopropílico al 70%, asegurándonos de que está desconectado de la red eléctrica.
5. Si existen comorbilidades de riesgo (patología cardiovascular, ...), familiares vulnerables (inmunodeprimidos,...) o indicación del prescriptor, proceda a la adecuación del fungible.
6. Con el equipo apagado, colocar la mascarilla, sistema de circuito montado según recomendaciones y encender el equipo. Una vez finalizada la sesión, apagar el equipo, quitar la mascarilla y proceder a la limpieza y desinfección del material fungible.
7. Si el paciente necesita ayuda para apagar el equipo, **el cuidador debe estar a más de 1m del paciente y emplear EPIs adecuados.**

Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad Francesa de Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el marco de la epidemia de COVID-19.

# Guía de montaje accesorios SAHS con sospecha o COVID-19 positivo

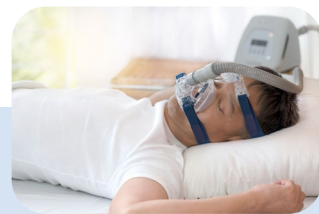

1. Emplee  **mascarilla nasobucal con codo azul**  o en su defecto, **tape los orificios de salida de aire de la mascarilla nasobucal con fuga**  empleando cinta aislante o similar.

Si la mascarilla es con fuga se tendrá que colocar un conector (\*) entre la mascarilla y el filtro.



2. Coloque el  **filtro bacteriológico debajo de la mascarilla** .



3. A continuación, se colocaría el  **puerto fuga**  para la salida de aire o en su defecto un  **racor con el tapón quitado** .




4. Seguidamente el  **circuito de la CPAP/BIPAP**  de tratamiento.



5. Por último, el  **filtro bacteriológico-viral** , que irá directamente  **en la salida del equipo** .



**Aclaración:** Solo en caso de uso combinado con O<sub>2</sub>, colocar el racor de O<sub>2</sub> (\*\*) entre la mascarilla y filtro bacteriológico-viral y conectarla al oxígeno.

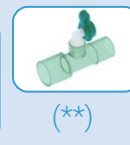

6. Si se utilizan  **sistemas de humidificación** , deben de  **retirarse eventualmente** .



7. Montaje completo del sistema de fungibles.



Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad Francesa de Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el marco de la epidemia de COVID-19.

Comprometidos con la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes respiratorios crónicos

